

# WALLET CARD




MiniMed™ 780G System

# Medtronic

**Medtronic MiniMed**  
18000 Devonshire Street  
Northridge, CA 91325 USA  
1800 646 4633  
+1818 576 5555  
[www.medtronicdiabetes.com](http://www.medtronicdiabetes.com)


M024356C003\_1

## Main Menu

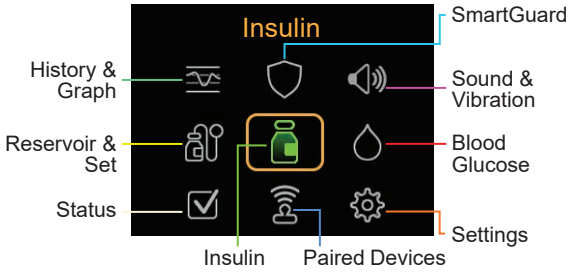

<b>History &amp; Graph</b> History Sensor Glucose Review* Graph Time in Range*	<b>SmartGuard</b> SmartGuard Checklist Temp Target* SmartGuard Settings* SmartGuard*
<b>Sound &amp; Vibration</b> Silence Sensor Alerts* Volume Sound Vibration Alert Settings	<b>Reservoir &amp; Set</b> New Reservoir & Set Fill Cannula
<b>Insulin</b> Bolus Basal Suspend All Delivery Delivery Settings	<b>Blood Glucose</b> Enter BG
<b>Status</b> Suspend All Delivery SmartGuard Checklist Pump Sensor*	<b>Paired Devices</b> Pair New Device Pair CareLink Mobile Meter Sensor
<b>Settings</b> Alert Settings Delivery Settings Device Settings	<i>*In some cases, menu choices appear, but are greyed out if certain settings are turned on or off.</i>

## Home screen in SmartGuard™ feature

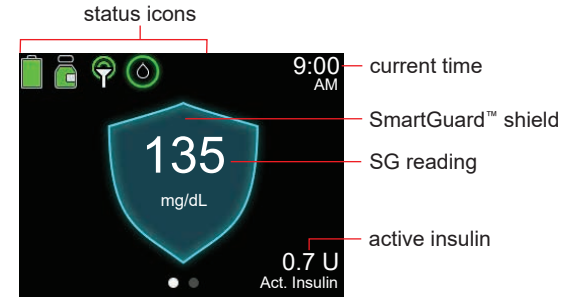


## Stopping and resuming insulin delivery

<b>Stopping all insulin delivery</b> The Suspend All Delivery option stops all insulin delivery (basal and bolus).	<b>To stop all insulin delivery:</b> 1. From the Home screen, press  and select . 2. Select <b>Suspend All Delivery</b> . 3. Select <b>Yes</b> when prompted.
<b>Resuming basal insulin delivery</b> The Resume Basal option restarts the basal delivery after the pump has been suspended. The Resume Basal option does not restart a bolus delivery.	<b>To resume basal insulin delivery:</b> 1. From the Home screen, press  and select . 2. Select <b>Resume Basal</b> . 3. Select <b>Yes</b> when prompted. <b>NOTE:</b> Basal insulin delivery can be manually resumed during a Suspend before low or Suspend on low event.
<b>Stopping a bolus delivery</b> The Stop Bolus option stops a bolus delivery only. The Stop Bolus option does not stop the basal delivery.	<b>To stop a normal bolus, or the Now portion of a Dual Wave™ bolus:</b> 1. From the Home screen, press  and select . 2. Select <b>Stop Bolus</b> . 3. Select <b>Yes</b> when prompted. 4. Select <b>Done</b> . <b>To stop a Square Wave™ bolus or the Square portion of a Dual Wave™ bolus:</b> 1. From the Home screen, press  and select . 2. Select <b>Bolus</b> . 3. Select <b>Stop Bolus</b> . 4. Select <b>Yes</b> when prompted. 5. Select <b>Done</b> .
<b>Manually resuming basal insulin delivery during a Suspend before low or Suspend on Low event.</b> If unable to wait for the pump to automatically resume the basal insulin during a Suspend before low or Suspend on low event, manually resume the basal delivery.	<b>To manually resume basal insulin delivery:</b> 1. From the Home screen, press  and select . 2. Select <b>Resume Basal</b> . 3. Select <b>Resume Basal</b> again. 4. Select <b>Yes</b> when prompted.


© 2021 Medtronic. All rights reserved. Medtronic, Medtronic logo and Further, Together are trademarks of Medtronic. All other brands are trademarks of a Medtronic company.

MiniMed™, SmartGuard™, Dual Wave™, and Square Wave™ are trademarks of Medtronic MiniMed, Inc.

## Home screen without CGM in Manual mode

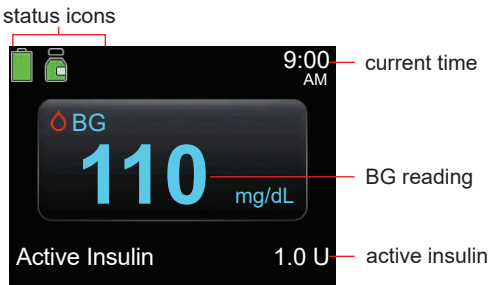

## Home screen with CGM in Manual mode

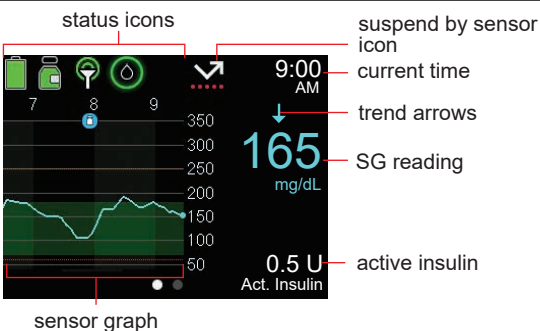

# 随身卡

MiniMed™ 780G系统




## 主菜单



<h3>历史记录和图表</h3> <p>历史 探头值回顾* 图表 葡萄糖在目标范围内时间*</p>	<h3>SmartGuard</h3> <p>SmartGuard检查清单 临时目标* SmartGuard设置* SmartGuard*</p>
<h3>声音和振动</h3> <p>静默探头警示* 音量 声音 振动 报警设置</p>	<h3>储药器和管路</h3> <p>新储药器和管路 定量充盈</p>
<h3>胰岛素</h3> <p>大剂量 基础率 暂停所有输注 输注设置</p>	<h3>血糖</h3> <p>输入血糖值</p>
<h3>状态</h3> <p>暂停所有输注 SmartGuard检查清单 胰岛素泵 探头*</p>	<h3>已配对的设备</h3> <p>新设备配对 CareLink配对 移动设备 血糖仪 探头</p>
<h3>设置</h3> <p>警示设置 输注设置 设备设置</p>	<p>*在某些情况下，会出现菜单选项，但如果某些设置已打开或关闭，菜单选项会显示为灰色。</p>

## SmartGuard™功能下的主页屏幕

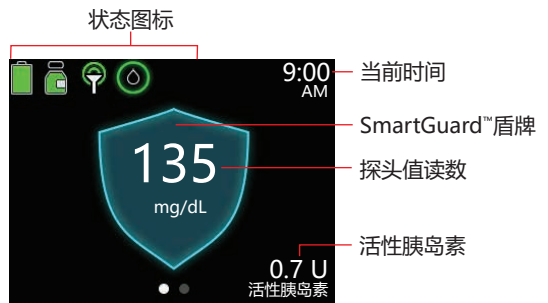

## 停止和恢复胰岛素输注

<h3>停止所有胰岛素输注</h3> <p>“暂停所有输注”选项停止所有的胰岛素输注（基础率和大剂量）。</p>	<h3>要停止所有胰岛素输注：</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 从主页屏幕，按下⊙，然后选择 。</li> <li>2. 选择<b>暂停所有输注</b>。</li> <li>3. 出现提示时，选择<b>是</b>。</li> </ol>
<h3>恢复基础率胰岛素输注</h3> <p>“恢复基础率”选项会在胰岛素泵已暂停后重启基础率输注。“恢复基础率”选项不会重启大剂量输注。</p>	<h3>要恢复基础率胰岛素输注：</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 从主页屏幕，按下⊙，然后选择 。</li> <li>2. 选择<b>恢复基础率</b>。</li> <li>3. 出现提示时，选择<b>是</b>。</li> </ol> <p><b>注：</b>在“低探头值前暂停输注”或“低探头值时暂停输注”事件期间可以手动恢复基础率胰岛素输注。</p>
<h3>停止大剂量输注</h3> <p>“停止大剂量”选项仅停止大剂量输注。“停止大剂量”选项不会停止基础率输注。</p>	<h3>要停止常规大剂量输注或Dual Wave™（双波）大剂量的“常规波”部分输注：</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 从主页屏幕，按下⊙，然后选择 。</li> <li>2. 选择<b>停止大剂量</b>。</li> <li>3. 出现提示时，选择<b>是</b>。</li> <li>4. 选择<b>完成</b>。</li> </ol> <h3>要停止Square Wave™（方波）大剂量或Dual Wave™（双波）大剂量的“方波”部分：</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 从主页屏幕，按下⊙，然后选择 。</li> <li>2. 选择<b>大剂量</b>。</li> <li>3. 选择<b>停止大剂量</b>。</li> <li>4. 出现提示时，选择<b>是</b>。</li> <li>5. 选择<b>完成</b>。</li> </ol>
<h3>在“低探头值前暂停输注”或“低探头值时暂停输注”事件期间手动恢复基础率胰岛素输注。</h3> <p>如果无法在“低探头值前暂停输注”或“低探头值时暂停输注”事件期间等胰岛素泵自动恢复基础率胰岛素，则可以手动恢复基础率输注。</p>	<h3>要手动恢复基础率胰岛素输注：</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 从主页屏幕，按下⊙，然后选择 。</li> <li>2. 选择<b>恢复基础率</b>。</li> <li>3. 再次选择<b>恢复基础率</b>。</li> <li>4. 出现提示时，选择<b>是</b>。</li> </ol>

© 2021 Medtronic. 保留所有权利。Medtronic、Medtronic徽标及Further, Together都是Medtronic的商标。所有其他品牌都是Medtronic所属公司的商标。

MiniMed™、SmartGuard™、Dual Wave™以及Square Wave™都是Medtronic MiniMed, Inc.的商标。

## 手动模式下不包含CGM的主页屏幕



## 手动模式下包含CGM的主页屏幕

