

WALLET CARD




MiniMed™ 780G System

Medtronic

Medtronic MiniMed
18000 Devonshire Street
Northridge, CA 91325 USA
1800 646 4633
+1818 576 5555
www.medtronicdiabetes.com


M024356C002_1

Main Menu

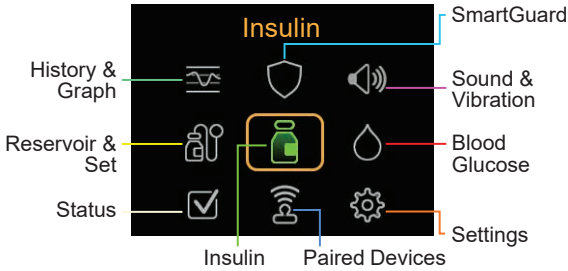

<h3>History & Graph</h3> <p>History Sensor Glucose Review* Graph Time in Range*</p>	<h3>SmartGuard</h3> <p>SmartGuard Checklist Temp Target* SmartGuard Settings* SmartGuard*</p>
<h3>Sound & Vibration</h3> <p>Silence Sensor Alerts* Volume Sound Vibration Alert Settings</p>	<h3>Reservoir & Set</h3> <p>New Reservoir & Set Fill Cannula</p>
<h3>Insulin</h3> <p>Bolus Basal Suspend All Delivery Delivery Settings</p>	<h3>Blood Glucose</h3> <p>Enter BG</p>
<h3>Status</h3> <p>Suspend All Delivery SmartGuard Checklist Pump Sensor*</p>	<h3>Paired Devices</h3> <p>Pair New Device Pair CareLink Mobile Meter Sensor</p>
<h3>Settings</h3> <p>Alert Settings Delivery Settings Device Settings</p>	<p><i>*In some cases, menu choices appear, but are greyed out if certain settings are turned on or off.</i></p>

Home screen in SmartGuard™ feature

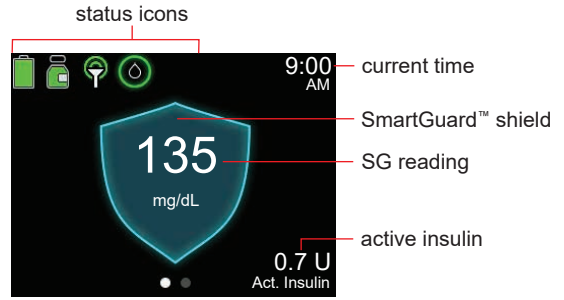

Stopping and resuming insulin delivery

Stopping all insulin delivery

The Suspend All Delivery option stops all insulin delivery (basal and bolus).

To stop all insulin delivery:

1. From the Home screen, press and select .
2. Select **Suspend All Delivery**.
3. Select **Yes** when prompted.

Resuming basal insulin delivery

The Resume Basal option restarts the basal delivery after the pump has been suspended. The Resume Basal option does not restart a bolus delivery.

To resume basal insulin delivery:

1. From the Home screen, press and select .
 2. Select **Resume Basal**.
 3. Select **Yes** when prompted.
- NOTE:** Basal insulin delivery can be manually resumed during a Suspend before low or Suspend on low event.

Stopping a bolus delivery

The Stop Bolus option stops a bolus delivery only. The Stop Bolus option does not stop the basal delivery.

To stop a normal bolus, or the Now portion of a Dual Wave™ bolus:

1. From the Home screen, press and select .
2. Select **Stop Bolus**.
3. Select **Yes** when prompted.
4. Select **Done**.

To stop a Square Wave™ bolus or the Square portion of a Dual Wave™ bolus:

1. From the Home screen, press and select .
2. Select **Bolus**.
3. Select **Stop Bolus**.
4. Select **Yes** when prompted.
5. Select **Done**.


Manually resuming basal insulin delivery during a Suspend before low or Suspend on Low event.

If unable to wait for the pump to automatically resume the basal insulin during a Suspend before low or Suspend on low event, manually resume the basal delivery.


To manually resume basal insulin delivery:

1. From the Home screen, press and select .
2. Select **Resume Basal**.
3. Select **Resume Basal** again.
4. Select **Yes** when prompted.

Home screen without CGM in Manual mode

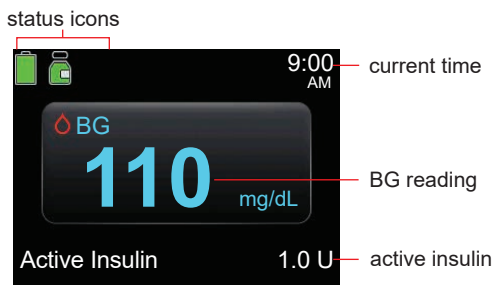

Home screen with CGM in Manual mode

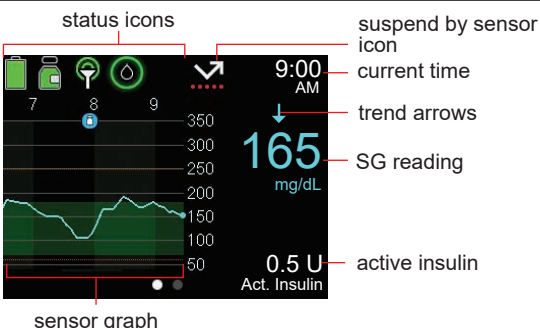

© 2021 Medtronic. All rights reserved. Medtronic, Medtronic logo and Further, Together are trademarks of Medtronic. All other brands are trademarks of a Medtronic company.


MiniMed™, SmartGuard™, Dual Wave™, and Square Wave™ are trademarks of Medtronic MiniMed, Inc.

TARJETA DE BOLSILLO

Sistema MiniMed™ 780G



Menú principal

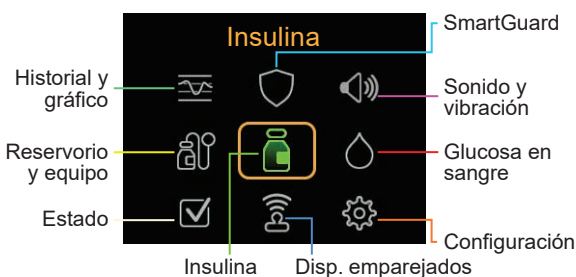

Historial y gráfico Historial Vistas sensor* Gráfico Tiempo en rango*	SmartGuard Lista comp. SmartGuard Objetivo temporal* Config. SmartGuard* SmartGuard*
Sonido y vibración Silenc. alertas de sensor* Volumen Sonido Vibración Configuración de las alertas	Reservoirio y equipo Reserv. y equipo nuevos Llenar cánula
Insulina Bolus Basal Susp. toda la infusión Ajustes de infusión	Glucosa en sangre Introd. GS
Estado Susp. toda la infusión Lista comp. SmartGuard Bomba Sensor*	Disp. emparejados Empar. nuevo disp. Emparejar CareLink Disp. móviles Medidor Sensor
Configuración Configuración de alertas Ajustes de infusión Configuración del dispositivo	<i>*En algunos casos las opciones de menú aparecen, pero se muestran sombreadas si ciertos ajustes de configuración están activados o desactivados.</i>

Pantalla de inicio en la función SmartGuard™



Detención y reanudación de la infusión de insulina

Detener toda la infusión de insulina

La opción Susp. toda la infusión detiene toda la infusión de insulina (basal y bolus).

Para detener toda la infusión de insulina:

1. En la pantalla de inicio, pulse y seleccione .
2. Seleccione **Susp. toda la infusión**.
3. Seleccione **Sí** cuando se indique.

Reanudar la infusión de insulina basal

La opción Reanudar basal reinicia la infusión basal tras la suspensión de la bomba. La opción Reanudar basal no reinicia una infusión de un bolus.

Para reanudar la infusión de insulina basal:

1. En la pantalla de inicio, pulse y seleccione .
 2. Seleccione **Reanudar basal**.
 3. Seleccione **Sí** cuando se indique.
- NOTA:** La infusión de insulina basal puede reanudarse manualmente durante un evento de Suspensión antes del límite bajo o Suspensión en el límite bajo.

Detener la infusión de un bolus

La opción Parar bolus detiene solamente una infusión de bolus. La opción Parar bolus no detiene la infusión basal.

Para detener un bolus normal o la parte Ahora de un bolus dual (Dual Wave™):

1. En la pantalla de inicio, pulse y seleccione .
2. Seleccione **Parar bolus**.
3. Seleccione **Sí** cuando se indique.
4. Seleccione **Finalizado**.

Para detener un bolus cuadrado (Square Wave™) o la parte Cuadrada de un bolus dual (Dual Wave™):

1. En la pantalla de inicio, pulse y seleccione .
2. Seleccione **Bolus**.
3. Seleccione **Parar bolus**.
4. Seleccione **Sí** cuando se indique.
5. Seleccione **Finalizado**.


Reanudación manual de la infusión de insulina basal durante un evento de Suspensión antes del límite bajo o Suspensión en el límite bajo.

Si no puede esperar a que la bomba reanude automáticamente la infusión de insulina basal durante un evento de Suspensión antes del límite bajo o Suspensión en el límite bajo, reanude manualmente la infusión basal.


Para reanudar manualmente la infusión de insulina basal:

1. En la pantalla de inicio, pulse y seleccione .
2. Seleccione **Reanudar basal**.
3. Seleccione **Reanudar basal** de nuevo.
4. Seleccione **Sí** cuando se indique.

Pantalla de inicio sin MCG en el modo manual

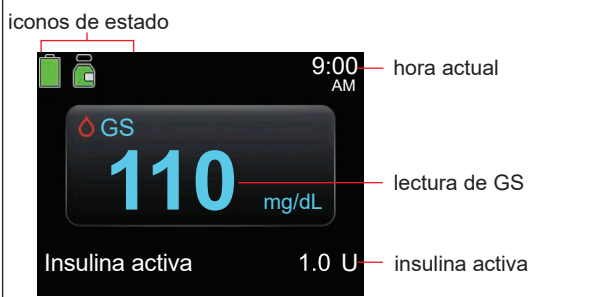

Pantalla de inicio con MCG en el modo manual

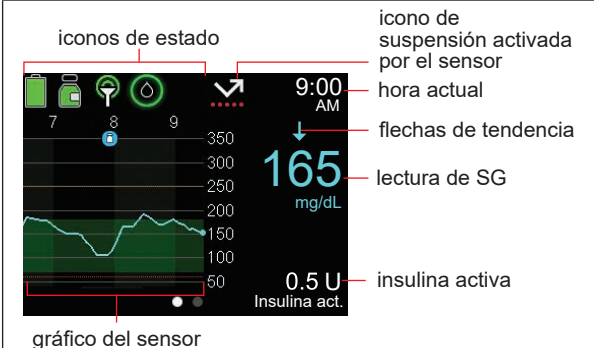

© 2021 Medtronic. Reservados todos los derechos. Medtronic, el logotipo de Medtronic y Further, Together son marcas comerciales de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una compañía de Medtronic.

MiniMed™, SmartGuard™, Dual Wave™ y Square Wave™ son marcas comerciales de Medtronic MiniMed, Inc.