


# CareLink™ PRO

PROGRAMSKA OPREMA ZA NADZOR ZDRAVLJENJA DIABETESA

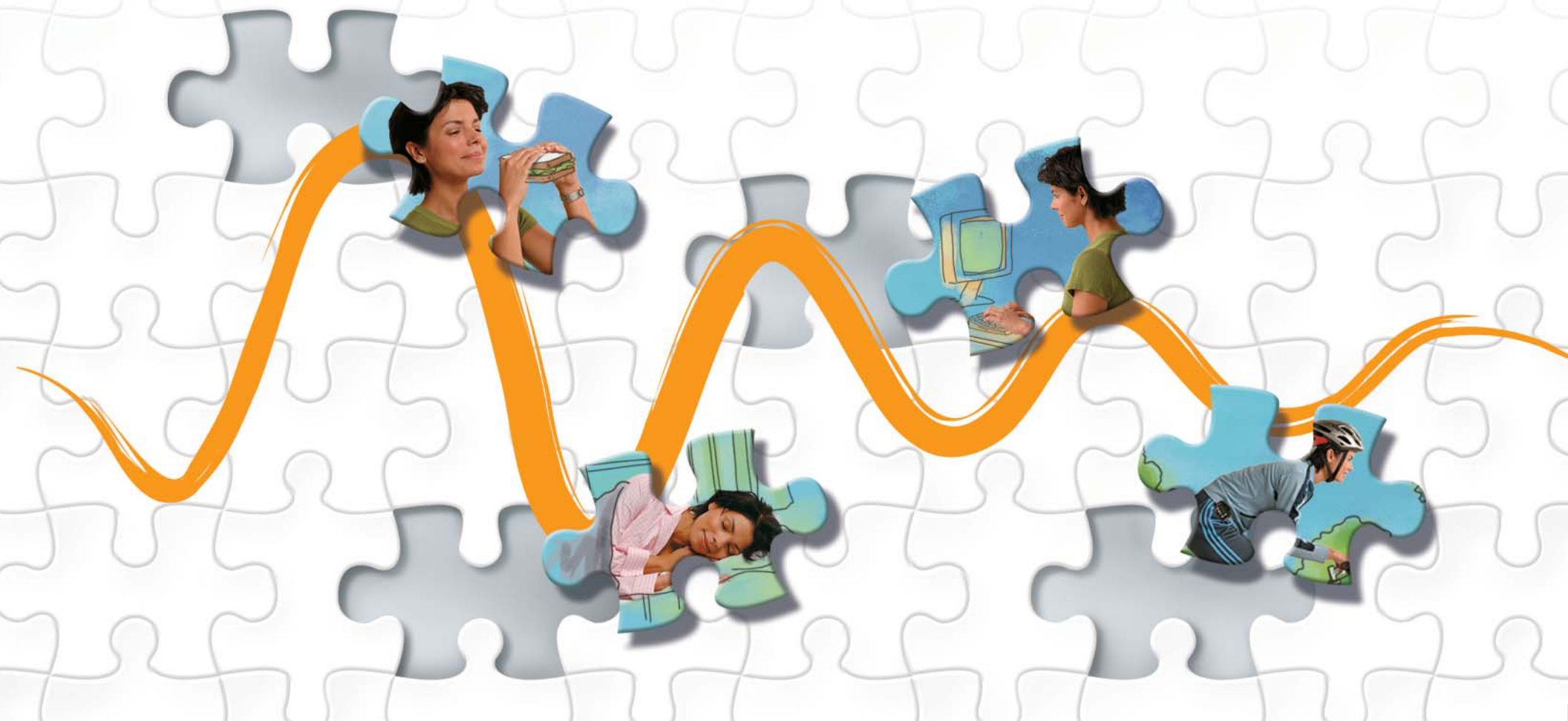


Referenčni vodnik po poročilih

## Navodila za uporabo

V spodnjih razdelkih so opisane vse vrste poročil CareLink™ Pro in iz česa so sestavljena. Podatki v poročilih, s katerimi smo ustvarili primere poročil, so izmišljeni.



**p. 2 Poročilo s pregledom senzorja in merilnika** V tem poročilu so povzeti podatki merilnika glukoze (in senzorja glukoze, če so na voljo), ogljikovih hidratov in insulina v izbranem obdobju. Na voljo je pregled bolnikovega nadzora sladkorja v krvi (čez dan, čez noč in ob obrokih) in obsežni statistični podatki.

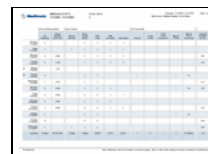

**p. 10 Poročilo o navadah** V tem poročilu so podatki o vedenju bolnika v izbranem obdobju. Na voljo je pregled bolnikovih navad glede na meritve glukoze, bolusne dogodke in dejavnosti insulinske črpalke.



**p. 12 Dnevniško poročilo** V tem poročilu so podatki merilnika glukoze, ogljikovih hidratov in insulina vsako uro izbranega obdobja. Na voljo je dnevnik dogodkov, ki se zabeležijo vsako uro, ter dnevne povprečne in skupne vrednosti.



**p. 15 Poročilo o nastavitvah naprave** V tem poročilu so nastavitve bolnikove insulinske črpalke ali nadzorne naprave Guardian v času izbranega nalaganja. S temi podatki lažje razumete druga poročila ali pa preprosto dokumentirate nastavitve bolnikove naprave.





**p. 17 Dnevno podrobno poročilo** V tem poročilu so podatki o vrednosti glukoze, ogljikovih hidratov in insulina za izbrani dan. Na voljo so podrobnosti o bolnikovem nadzoru sladkorja v krvi, bolusnih dogodkih, dejavnostih bazalnega odmerka in obsežni statistični podatki.

## Poročilo s pregledom senzorja in merilnika




**Sensor & Meter Overview (1 of 3)** Drake, Ethan  
12/6/2007 - 12/19/2007 0

Generated: 12/20/2007 9:36:44 AM Page 1 of 3  
Data Sources: MiniMed Paradigm 722 (E.Drake)

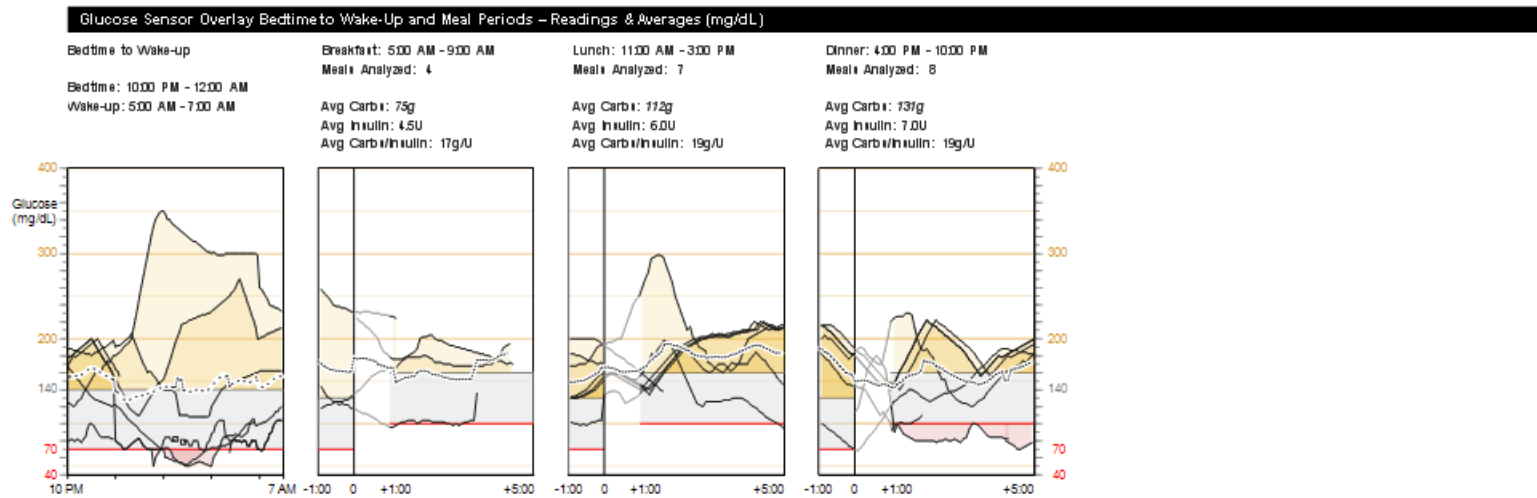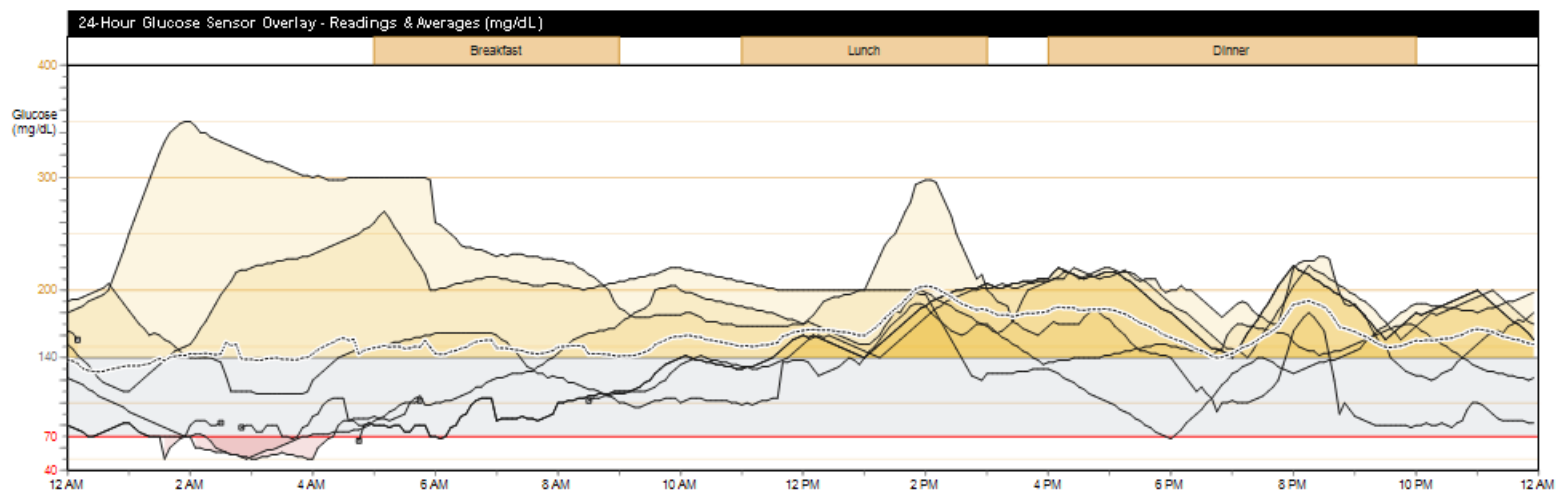


— Sensor trace    — Interrupted    ... Average

**OPOMBA:** Ta stran se prikaže le, ko imate podatke iz senzorja.

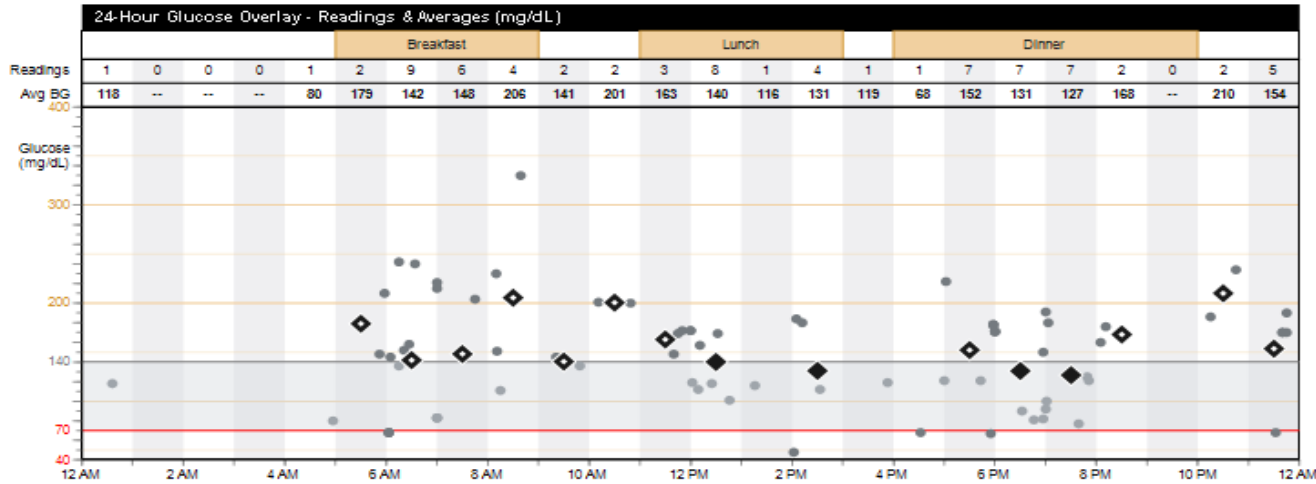


Statistics	12/6	12/19
Avg BG (mg/dL)	147 ± 54	
BG Readings	75	5,9/day
Readings Above Target	43	57%
Readings Below Target	7	9%
Sensor Avg (mg/dL)	158 ± 55	
Avg AUC > 140 (mg/dL)	32.5	6d 17h
Avg AUC < 70 (mg/dL)	0.3	6d 17h
Avg Daily Carbs (g)	338 ± 104	
Carbs/Bolus Insulin (g/U)	18	
Avg Total Daily Insulin (U)	36.7 ± 6.3	
Avg Daily Basal (U)	17.7	48%
Avg Daily Bolus (U)	18.9	52%

Glucose Overlay Bedtime to Wake-Up and Meal Periods - Readings & Averages (mg/dL)

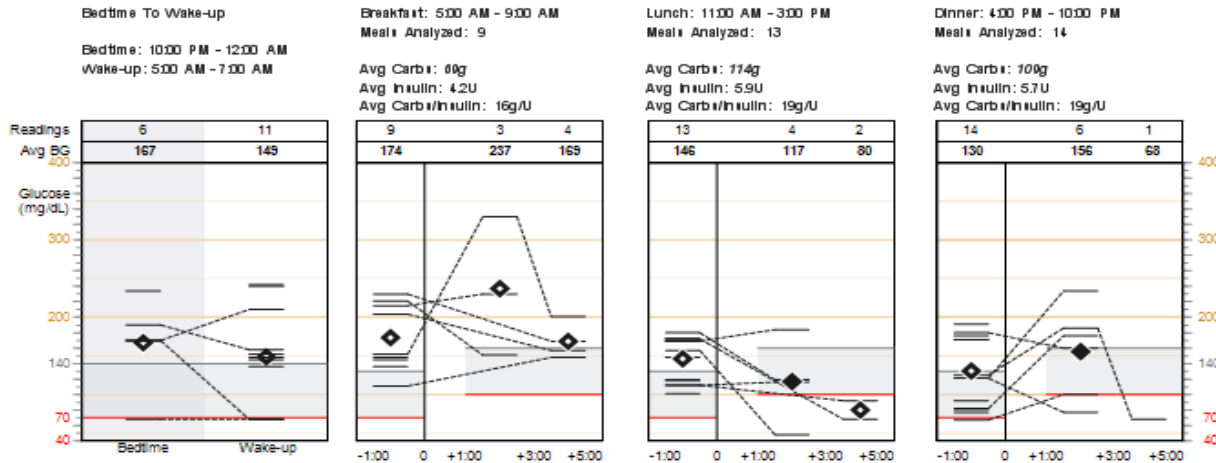

— BG reading ● BG reading ▼▲ Off chart ◆ Average within target range ◆ Average outside target range

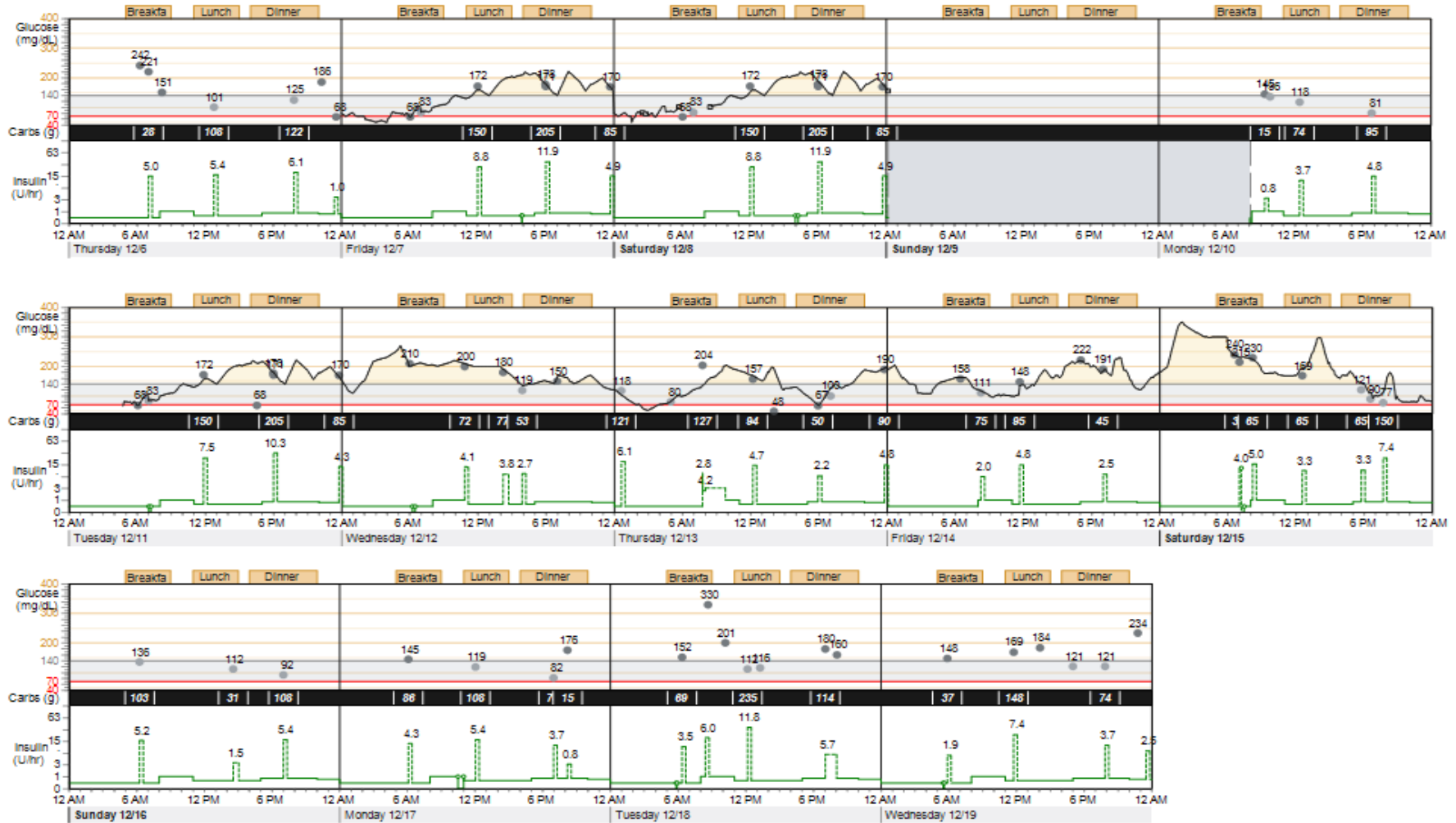

— Sensor trace      ● BG reading      — Basal      - - - Bolus      ⊥ Suspend      ⌚ Time change  
- - - Interrupted      ▼ Off chart      ····· Temp basal      ■ Injected insulin (U)

## Opis poročila s pregledom senzorja in merilnika

V poročilu s pregledom senzorja in merilnika so podatki iz bolnikove insulinske črpalke, merilnikov glukoze in senzorja glukoze. V njem so označena območja, ki bi jih bilo dobro natančneje pregledati. Poročilo je lahko dolgo več strani.

V tem poročilu so podatki, s katerimi ugotovite raven in kakovost nadzora, ki ga ima bolnik nad sladkorno boleznijo. Iz različnih grafikonov in grafov lahko ugotovite, kdaj kakovost nadzora odstopa v značilnem dnevu in v obdobju poročanja.

Znak	Pomen
— ali ●	Vrednost GK: vrednosti glukoze v krvi, ki jih sporoči črpalka ali merilnik
▼▲	Odstopanje: vrednost merilnika glukoze >400mg/dl (22,22 mmol/l) ali <40mg/dl (2,22 mmol/l)
◆	Povprečna vrednost znotraj ciljnega obsega: povprečje vseh vrednosti glukoze je znotraj bolnikovega ciljnega obsega
◇	Povprečna vrednost izven ciljnega obsega: povprečje vseh vrednosti glukoze je nad ali pod bolnikovim ciljnim obsegom
~	Senzor zaznal sled: senzor glukoze je zaznal stalno sled
⏏	Prekinjeno: prekinjena komunikacija med oddajnikom senzorja in insulinsko črpalke
•••••	Povprečje: povprečje vseh sledi glukoze, ki jih je izmeril senzor
—	Bazalni odmerek: stalno dovajanje insulina iz insulinske črpalke
....	Začasni bazalni odmerek: začasna sprememba v dovajanju odmerka bazalnega insulina
....	Bolus: dovajanje insulina iz črpalke, ki prepreči ali odpravi visoko raven glukoze
⏏	Ustavi: prekinitev celotnega dovajanja insulina iz črpalke
⌚	Sprememba časa: v insulinski črpalke ali uri Guardian je prišlo do spremembe časa
■	Vbrizgani insulin (E): zaznano vbrizganje insulina




## Grafikoni in grafi senzorja

**OPOMBA:** Grafikoni in grafi senzorja so prikazani le, ko imate podatke iz senzorja.

### 24-urni senzor glukoze – izmerjene vrednosti in povprečja

V tem grafu so prikazane sledi glukoze v krvi za vsak dan, ko je bolnik nosil senzor. Časovna obdobja, v katerih ima bolnik obroke, so označena z rumenimi kvadrati nad grafom. Bolnikov ciljni obseg glukoze je obarvan sivo. Ko senzor izmeri sled glukoze nad ciljnim obsegom, je območje med sledjo in ciljnim obsegom obarvano svetlo rumeno. Ko senzor izmeri sled glukoze pod ciljnim obsegom, je območje med sledjo in ciljnim obsegom obarvano svetlo rdeče. Intenzivnost obarvanosti v grafu je odvisna od števila odstopanj, do katerih je prišlo v tem časovnem obdobju. Črtkana črta označuje povprečje sledi glukoze, ki jo je izmeril senzor.

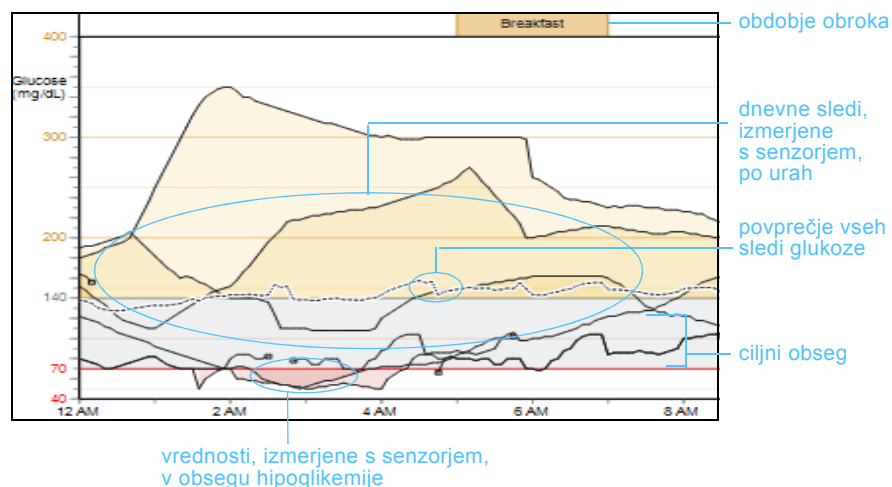


### Senzor glukoze – od časa pred spanjem do bujenja in med obroki – izmerjene vrednosti in povprečja

#### Od časa pred spanjem do bujenja

V tem grafu je prikazana sled glukoze v krvi, izmerjena v času spanja, za vsak dan, ko je bolnik nosil senzor. Čas pred spanjem in čas bujenja sta prilagojena bolniku in navedena nad grafom. Bolnikov ciljni obseg glukoze je obarvan sivo. Ko senzor izmeri sled glukoze nad ciljnim obsegom, je območje med sledjo in ciljnim obsegom obarvano svetlo rumeno. Ko senzor izmeri sled glukoze pod ciljnim obsegom, je območje med sledjo in ciljnim obsegom obarvano svetlo rdeče. Intenzivnost obarvanosti v grafu je odvisna od števila odstopanj, do katerih je prišlo v tem časovnem obdobju. Črtkana črta označuje povprečje sledi glukoze, ki jo je izmeril senzor.

#### Obdobja obrokov


V teh grafih so sledi glukoze v krvi, ki jih je senzor izmeril pred obrokom in po obroku. Nad grafi so navedeni časovna obdobja, število analiziranih obrokov, vnos ogljikovih hidratov, povprečna količina insulina in povprečna količina ogljikovih hidratov na enoto bolusnega insulina v posameznem obroku. Bolnikov ciljni obseg glukoze je obarvan sivo. Ko senzor izmeri sled glukoze nad ciljnim obsegom, je območje med sledjo in ciljnim obsegom obarvano svetlo rumeno. Ko senzor izmeri sled glukoze pod ciljnim obsegom, je območje med sledjo in ciljnim obsegom obarvano svetlo rdeče. Intenzivnost obarvanosti v grafu je odvisna od števila odstopanj, do katerih je prišlo v tem časovnem obdobju. Črtkana črta označuje povprečje sledi glukoze, ki jo je izmeril senzor v času obroka.

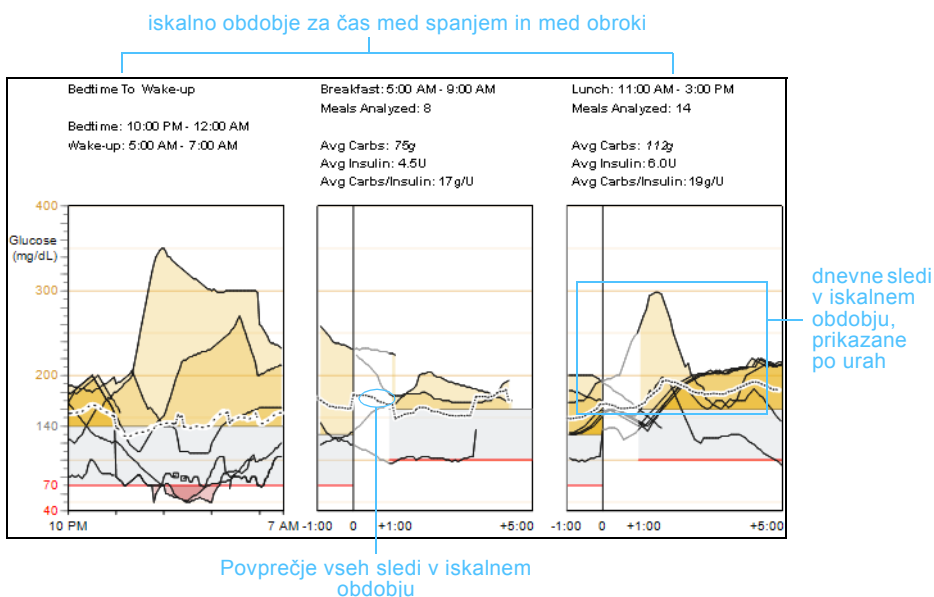

## Grafikoni in grafi merilnika

24-urni prikaz vrednosti glukoze – izmerjene vrednosti in povprečja

V grafu so prikazane vrednosti glukoze, izmerjene z merilnikom v obdobju poročanja. Z zbranimi podatki je lažje določiti dnevne vzorce v bolnikovem nadzorovanju vrednosti glukoze v krvi. V traku na vrhu grafikona je prikazano število izvedenih meritev glukoze v krvi vsako uro in povprečna vrednost glukoze v krvi. Podatki o ravni glukoze v krvi so vrisani pod trakom.

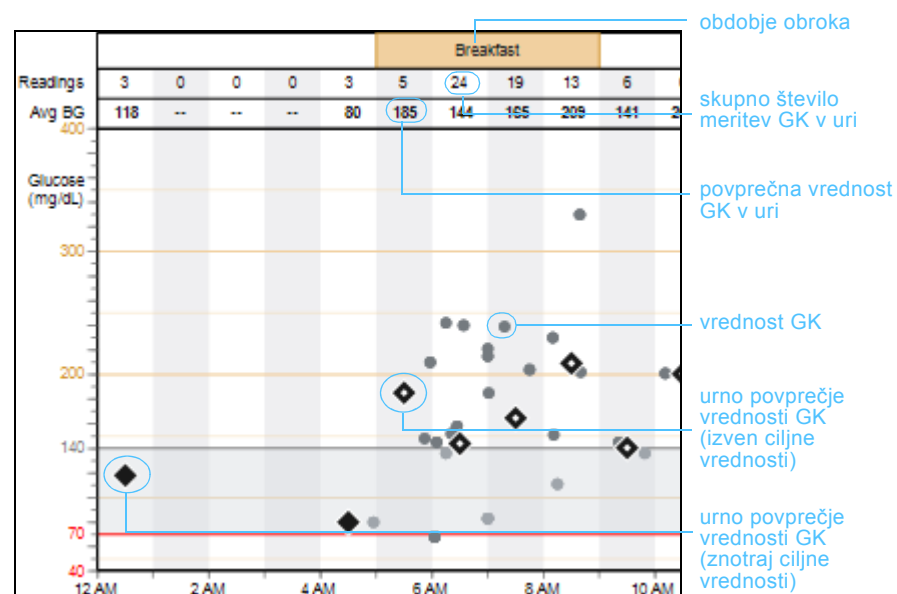



## Statistika

V statistični tabeli je povzetek spodaj opisanih meritev.

### Definicije

**[Avg BG (mg/dL)] (Povpr. GK (mg/dl)):** Povprečje vseh vrednosti glukoze, izmerjenih z merilnikom, in standardni odklon

**[BG Readings] (Vrednosti GK):** Število izmerjenih vrednosti glukoze v krvi (skupna vrednost in dnevno povprečje)

**[Readings Above Target] (Vrednosti nad ciljem):** Število vrednosti glukoze v krvi, izmerjenih z merilnikom, ki so nad ciljnim obsegom (skupna vrednost in dnevno povprečje)

**[Readings Below Target] (Vrednosti pod ciljem):** Število vrednosti glukoze v krvi, izmerjenih z merilnikom, ki so pod ciljnim obsegom (skupna vrednost in dnevno povprečje)

**[Sensor Avg (mg/dL or mmol/l)] (Povpr. senzorja (mg/dl ali mmol/l)):** Povprečje vseh vrednosti glukoze, izmerjenih s senzorjem, in standardni odklon

**[Avg AUC >140 (mg/dL)] (Povpr. AUC > 140 (mg/dl)) ali [Avg AUC >7,77 (mmol/L)] (Povpr. AUC >7,77 (mmol/l)):** Povprečna izpostavljenost hiperglikemiji, najvišje ciljno območje je prikazano glede na bolnikove nastavitve

**[Avg AUC <70 (mg/dL)] (Povpr. AUC < 70 (mg/dl)) ali [Avg AUC <3,88 (mmol/L)] (Povpr. AUC <3,88 (mmol/l)):** Povprečna izpostavljenost hipoglikemiji, najnižje ciljno območje je prikazano glede na bolnikove nastavitve

**[Avg Daily Carbs (g)] (Povpr. dnevno OH (g)):** Povprečen dnevni vnos ogljikovih hidratov in standardni odklon

**[Carbs/Bolus Insulin (g/U)] (OH/bolusni insulin (g/E)):** Povprečni vnos ogljikovih hidratov na enoto bolusnega insulina

**[Avg Total Daily Insulin (U)] (Povpr. skupni dnevni insulin (E)):** Povprečen vnos bazalnega in bolusnega insulina ter standardni odklon

**[Avg Daily Basal (U)] (Povpr. dnevno baz. (E)):** Povprečni dnevni vnos bazalnega insulina (E in odstotki od skupne vrednosti)

**[Avg Daily Bolus (U)] (Povpr. dnevno bolus (E)):** Povprečni dnevni vnos bolusnega insulina (E in odstotki od skupne vrednosti)

**OPOMBA:** Dnevne povprečne vrednosti in standardni odkloni veljajo le za dni, v katerih je naprava 24 ur pošiljala stalne in popolne podatke. Dnevi, v katerih je prišlo do spremembe časa ali za katere so na voljo le delni podatki, niso zajeti v teh izračunih, še vedno pa so prikazani na grafih in v skupnih vrednostih.

Statistics	11/5	12/18
Avg BG (mg/dL)	150 ± 55	
BG Readings	222	5.5/day
Readings Above Target	127	57%
Readings Below Target	18	8%
Sensor Avg (mg/dL)	160 ± 55	
Avg AUC > 140 (mg/dL)	33.4	18d 5h
Avg AUC < 70 (mg/dL)	0.3	18d 5h
Avg Daily Carbs (g)	332 ± 95	
Carbs/Bolus Insulin (g/U)	18	
Avg Total Daily Insulin (U)	36.4 ± 5.9	
Avg Daily Basal (U)	18.0	49%
Avg Daily Bolus (U)	18.4	51%

povprečje in standarden odklon

količina na dan

skupaj


odstotek

## Vrednosti glukoze od časa pred spanjem do bujenja in med obroki – izmerjene vrednosti in povprečja

V grafu z izmerjenimi in povprečnimi vrednostmi glukoze od časa pred spanjem do bujenja je prikazana zadnja vrednost glukoze, izmerjena z merilnikom v navedenem času pred spanjem, in prva vrednost glukoze, izmerjena z merilnikom v navedenem času bujenja, za vsak dan v obdobju poročanja. Ustrezne vrednosti glukoze od časa pred spanjem do bujenja so povezane s črtkano črto.

V grafu za čas obroka (zajtrk, kosilo in večerja) so združene vrednosti glukoze, ki jih je merilnik izmeril pred obrokom in po njem, za vsak dan v obdobju poročanja. Vrednosti glukoze, izmerjene z merilnikom, so na grafih povezane z bolusnim odmerkom ob obroku.

Če je v izbranem obdobju z merilnikom izmerjena več kot 1 (ena) vrednost glukoze, je graf izrisan glede na vrednost, ki je najbližje bolusnemu odmerku. S pomočjo grafov je mogoče prepoznati dnevne vzorce v bolnikovih vrednostih glukoze pred obrokom in po njem, in sicer od 2 ur pred obrokom do 5 ur po obroku.

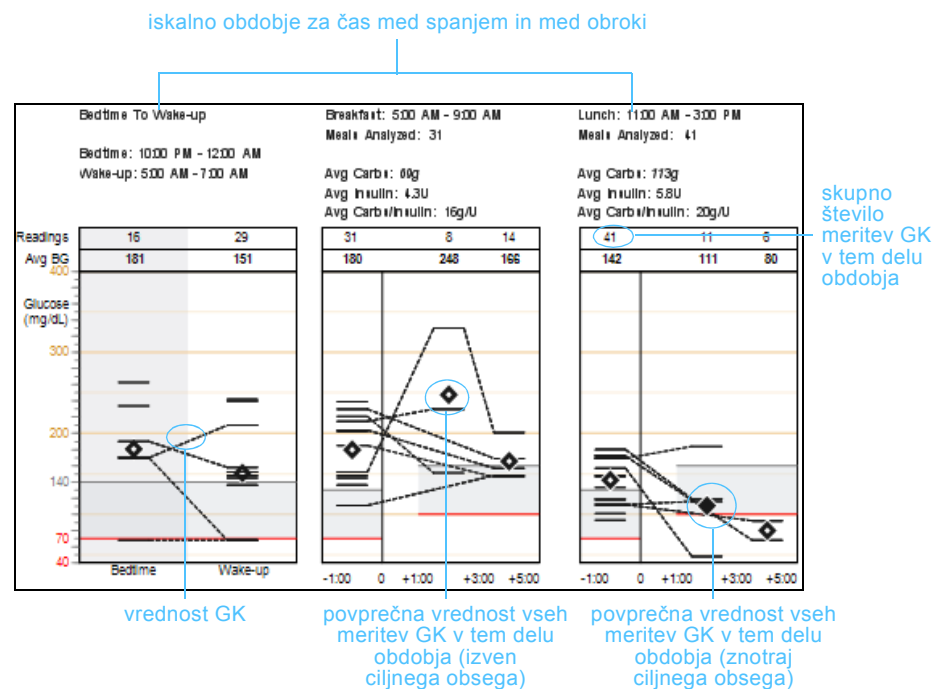


## Glukoza, ogljikovi hidrati, insulin

V tem grafu so prikazane vrednosti glukoze, izmerjene s senzorjem, vrednosti glukoze, izmerjene z merilnikom ter zabeležene za umerjanje in kot potrditev meritve glukoze v krvi, odvzeti iz prsta, vnos ogljikovih hidratov, zabeležen v računalu Bolus Wizard®, dovajanje bazalnega in bolusnega insulina ter vbrizgani insulin.

Bolnikova časovna obdobja obrokov so označena nad grafom. Ko senzor izmeri sled glukoze nad ciljnimi obsegom, je območje med sledjo in ciljnimi obsegom obarvano svetlo rumeno. Ko senzor izmeri sled glukoze pod ciljnimi obsegom, je območje med sledjo in ciljnimi obsegom obarvano svetlo rdeče.

Če so v obdobju poročanja na voljo podatki za več kot 14 dni, bo graf dolg več strani.

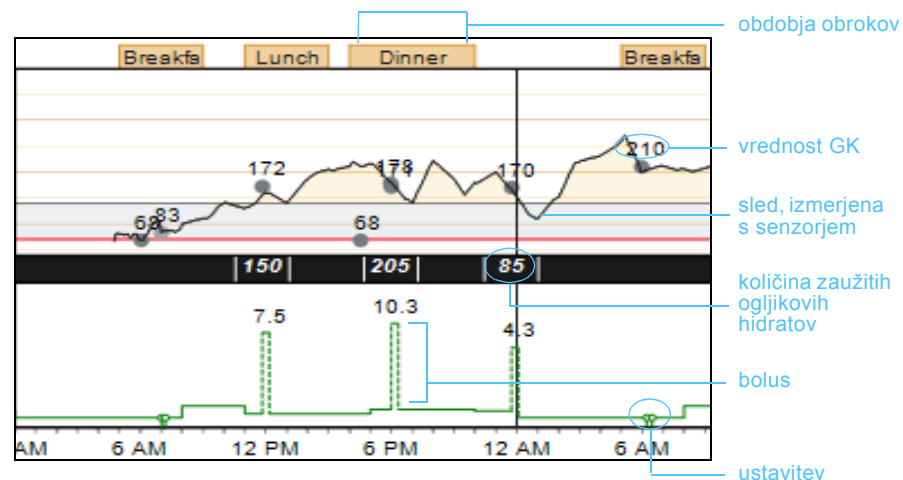

## Poročilo o navadah



**Adherence (1 of 1)**  
11/1/2007 - 11/14/2007

Drake, Ethan  
0

Generated: 11/15/2007 1:38:19 PM Page 1 of 1  
Data Sources: MiniMed Paradigm 722 (E.Drake)

	Glucose Measurements		Bolus Events					Priming Events					Suspend Duration (h:mm)
	BG Readings	Sensor Duration (d:hh:mm)	Manual Boluses	Bolus Wizard Events	With Food	With Correction	Overridden	Rewind	Fixed Primes	Fixed Prime Volume (U)	Manual Primes	Manual Prime Volume (U)	
Thursday 11/1/2007	3			3	3	1	1						
Friday 11/2/2007	7		1	3	3	1	1						
Saturday 11/3/2007	6	24:00		3	3	3	3						0:02
Sunday 11/4/2007	6	21:05		3	3	3	3						0:15
Monday 11/5/2007		0:15											
Tuesday 11/6/2007	4			3	3			1			1	3.1	
Wednesday 11/7/2007	7	19:15		3	3								0:11
Thursday 11/8/2007	5	24:00		3	3	1					1	0.5	0:15
Friday 11/9/2007	8	24:00		5	5	3	1						
Saturday 11/10/2007	5	24:00		3	3	2							
Sunday 11/11/2007	7	24:00		5	5	3	2						0:15
Monday 11/12/2007	3			3	3						1	0.9	
Tuesday 11/13/2007	4			4	4								0:30
Wednesday 11/14/2007	7		1	3	3								0:05
Summary	5.7/day	6d 16h 35m	0.2/day	3.4/day	100.0%	41.5%	26.8%	1	0	--	3	0.7U/prime	1:33

● Partial day

Note: Partial days will not be included in summary averages. Days on which a time change occurred are considered to be partial days.

## Kratek pregled poročila o navadah

V poročilu o navadah so podatki iz bolnikove insulinske črpalke, merilnikov glukoze in senzorja glukoze (če ga bolnik uporablja). Omogoča vpogled v bolnikovo upravljanje ravni glukoze v krvi. V poročilu o navadah je povzetek podatkov za največ 2 tedna. V nadaljevanju so opisani deli poročila.

## Stolpec z datumom

V tem stolpcu je lahko prikazan simbol za „delni dan“, ki označuje, da so za ta dan na voljo le delni podatki. Do tega lahko pride, ko je v črpalci ali napravi Guardian prišlo do časovne spremembe.

## Meritve glukoze

V razdelku [Glucose Measurements] (Meritve glukoze) so stolpci s podatki o številu meritev z merilnikom in o trajanju uporabe senzorja glukoze.

## Bolusni odmerki

V razdelku [Bolus Events] (Bolusni odmerki) je 5 stolpcev s skupnim številom teh odmerkov: (1) ročni bolusi, (2) odmerki s funkcijo Bolus Wizard, (3) bolusni odmerki s funkcijo Bolus Wizard in z dodatkom hrane, (4) bolusni odmerki s funkcijo Bolus Wizard in s korekcijskim odmerkom in (5) preglasitve izračunov funkcije Bolus Wizard.

## Polnjenja

V razdelku [Priming Events] (Polnjenja) so stolpci s številom previjan insulinske črpalke, številom fiksnih polnjenj in prostornino fiksnih polnjenj, številom ročnih polnjenj in prostornino ročnih polnjenj.

## Ustavitve črpalke

V zadnjem stolpcu tabele je prikazano trajanje (v urah in minutah) ustavitve insulinske črpalke.

## Vrstica [Summary] (Povzetek)

Na dnu posameznega stolpca so navedene skupne vrednosti ali dnevne povprečne vrednosti.

Znak	Pomen
●	Delni podatki: za ta dan so na voljo delni podatki. Podatki so prikazani v grafih in v skupnih vrednostih, niso pa upoštevani v dnevni povprečjih ali standardnih odklonih.

### dan z delnimi podatki

		Glucose Measurements		Bolus Events					Priming Events					
		BIG Readings	Sensor Duration (d:h:m)	Manual Boluses	Bolus Wizard Events	With Food	With Correction	Overridden	Revised	Fixed Primes	Fixed Prime Volume (U)	Manual Primes	Manual Prime Volume (U)	Suspend Duration (h:mm)
	Thursday 11/1/2007	3			3	3	1	1						
	Friday 11/2/2007	7		1	3	3	1	1						
	Saturday 11/3/2007	6	24:00		3	3	3	3						0:02
	Sunday 11/4/2007	6	21:05		3	3	3	3						0:15
	Monday 11/5/2007		0:16											
	Tuesday 11/6/2007	4			3	3			1			1	3.1	
	Wednesday 11/7/2007	7	19:15		3	3								0:11
	Thursday 11/8/2007	5	24:00		3	3	1					1	0.5	0:15
	Friday 11/9/2007	8	24:00		6	6	3	1						
	Saturday 11/10/2007	5	24:00		3	3	2							0:15
	Sunday 11/11/2007	7	24:00		5	5	3	2						0:15
	Monday 11/12/2007	3			3	3						1	0.9	
	Tuesday 11/13/2007	4			4	4								0:30
	Wednesday 11/14/2007	7		1	3	3								0:05
	Summary	5.7/day	0d 10h 35m	0.2/day	3.4/day	100.0%	41.5%	20.8%	1	0	--	3	0.7 U/prime	1:33

Partial day

Note: Partial days will not be included in summary averages. Days on which a time change occurred are considered to be partial days.

## Dnevniško poročilo



Logbook (1 of 1)  
11/19/2007 - 12/2/2007

Drake, Ethan  
0

Generated: 12/3/2007 10:12:58 AM Page 1 of 1  
Data Sources: MiniMed Paradigm 722 (E.Drake)

	Breakfast					Lunch					Dinner					Daily Totals										
	12 AM	1 AM	2 AM	3 AM	4 AM	5 AM	6 AM	7 AM	8 AM	9 AM	10 AM	11 AM	12 PM	1 PM	2 PM	3 PM	4 PM	5 PM	6 PM	7 PM	8 PM	9 PM	10 PM	11 PM		
Monday 11/19/2007							242	221	151				101								125			186	68	Average (7): 156mg/dL Carbs: 258g Insulin: 32.5U Bolus: 54%
Tuesday 11/20/2007							68	83					172						178	171					170	Average (6): 140mg/dL Carbs: 440g Insulin: 41.3U Bolus: 62%
Wednesday 11/21/2007							68	83					172						178	171					170	Average (6): 140mg/dL Carbs: 440g Insulin: 41.3U Bolus: 62%
Thursday 11/22/2007																										Average (0): -- Carbs: -- Insulin: -- Bolus: --
Friday 11/23/2007											145		118								81					Average (4): 120mg/dL Carbs: 194g Insulin: 23.2U Bolus: 40%
Saturday 11/24/2007							68	83					172					68	178	171					170	Average (7): 130mg/dL Carbs: 440g Insulin: 41.3U Bolus: 54%
Sunday 11/25/2007						210						200				180	119			150						Average (5): 172mg/dL Carbs: 202g Insulin: 28.7U Bolus: 37%
Monday 11/26/2007	118				80			204					157		48				67		100				190	Average (8): 121mg/dL Carbs: 482g Insulin: 44.3U Bolus: 56%
Tuesday 11/27/2007							158		111				148						222		191					Average (5): 166mg/dL Carbs: 275g Insulin: 28.8U Bolus: 33%
Wednesday 11/28/2007							240	215	230				169						121	90	77					Average (7): 163mg/dL Carbs: 377g Insulin: 39.9U Bolus: 58%
Thursday 11/29/2007							136	103								112					92					Average (3): 113mg/dL Carbs: 242g Insulin: 30.7U Bolus: 39%
Friday 11/30/2007							145	86					119							82		176				Average (4): 131mg/dL Carbs: 283g Insulin: 32.1U Bolus: 44%
Saturday 12/1/2007							152	69	330		201		112		116						180		160			Average (7): 179mg/dL Carbs: 418g Insulin: 46.1U Bolus: 59%
Sunday 12/2/2007							148	37					169				184			121		121		234		Average (6): 163mg/dL Carbs: 259g Insulin: 33.1U Bolus: 47%

■ < 70mg/dL   
 ■ > 140mg/dL   
 ○ Multiple readings (most extreme shown)   
 ⏪ Pump rewind   
 ⏩ Suspend   
 ○ Manual bolus or bolus with correction   
 ----- Skipped meal   
 ● Partial day   
 ⌚ Time change

## Kratek pregled dnevniškega poročila

V dnevniškem poročilu so dvotedenski podatki iz bolnikove insulinske črpalke in merilnikov glukoze v obliki tabele. V tabeli so dnevi prikazani v vrsticah, ure pa v stolpcih; tako so ustvarjene celice s podatki. V tem poročilu ni podatkov iz senzorja.

### Celice s podatki

Vsaka celica v obdobju poročanja ustreza uri v dnevu; v njej so lahko največ tri vrednosti: (1) merilnik, (2) grami ogljikovih hidratov in (3) enote insulina, dovajanega kot bolus. Časovna obdobja obrokov so označena na vrhu poročila. V nadaljevanju je opisan vsak element v celici s podatki.











#### Vrednosti glukoze

Vrednosti glukoze v krvi so prikazane v zgornjem delu celice. Vrednosti glukoze, ki so nad ali pod bolnikovim ciljnim obsegom, so označene. Če je bilo v eni uri pridobljenih več vrednosti, je to označeno s piko v zgornjem desnem kotu vrednosti glukoze; prikazana je najbolj skrajna vrednost, in sicer po teh merilih:

- Prikazana je najnižja vrednost pod bolnikovim ciljnim obsegom.
- Če ni vrednosti pod ciljnim obsegom, obstajajo pa vrednosti nad ciljnim obsegom, je prikazana najvišja vrednost.
- Če ni niti vrednosti pod niti vrednosti nad ciljnim obsegom, je prikazana vrednost, ki najbolj odstopa od sredine bolnikovega ciljnega obsega.

#### Obroki

Časovni obsegi obrokov ustrezajo bolnikovim navedenim obdobjem obrokov in so označeni na vrhu poročila. Vrednosti ogljikovih hidratov, ki jih izračuna Bolus Wizard, so seštete za vsako uro obdobja obroka in prikazane v črnem polju na sredini celice. Če v uri znotraj obdobja obroka ni zabeležena nobena vrednost ogljikovih hidratov, je prikazan znak za izpuščen obrok.


Znak	Pomen
	Glukoza <70 mg/dl (<3,88 mmol/l): vrednost glukoze je pod spodnjo mejo bolnikovega ciljnega obsega
	Glukoza >140 mg/dl (>7,77 mmol/l): vrednost glukoze je nad zgornjo mejo bolnikovega ciljnega obsega
	Vrednost ogljikovih hidratov: skupna vrednost ogljikovih hidratov; prikazana vrednost pomeni skupno količino zaužitih ogljikovih hidratov v določeni uri
	Več rezultatov: najbolj skrajna vrednost, če je v roku neke ure pridobljenih več vrednosti glukoze; prednost imajo vrednosti v območju hipoglikemije
	Previjanje črpalke: prišlo je do previjanja insulinske črpalke (po navadi zaradi zamenjave rezervoarja ali za odpravljanje zamašitev)
	Ustavi: prekinitve celotnega dovajanja insulina iz insulinske črpalke
	Ročni bolus ali bolus s korekcijskim odmerkom: dovajan ročni bolus ali bolus, ki ga je izračunal Bolus Wizard, ko je izmerjena vrednost glukoze izven bolnikovega ciljnega obsega
	Izpuščen obrok: v časovnem obsegu obroka ni bil zabeležen vnos ogljikovih hidratov
	Sprememba časa: v uri insulinske črpalke je prišlo do spremembe časa
	Delni podatki: za ta dan so na voljo delni podatki. Podatki so prikazani v grafih in v skupnih vrednostih, niso pa upoštevani v dnevni povprečjih ali standardnih odklonih.

## Bolus

V spodnjem delu celice so prikazani bolusni odmerki, programirani v določeni uri. Če vrednost bolusnega insulina izhaja iz ročnega bolusa ali korekcijska odmerka s funkcijo Bolus Wizard, je vrednost obkrožena.

## Ustavitve in spremembe časa

Če je bolnikova insulinska črpalka ustavljena ali je v njeni uri prišlo do spremembe časa, je ustrezen znak prikazan v zgornjem levem delu posamezne celice za uro, v kateri je prišlo do tega dogodka.

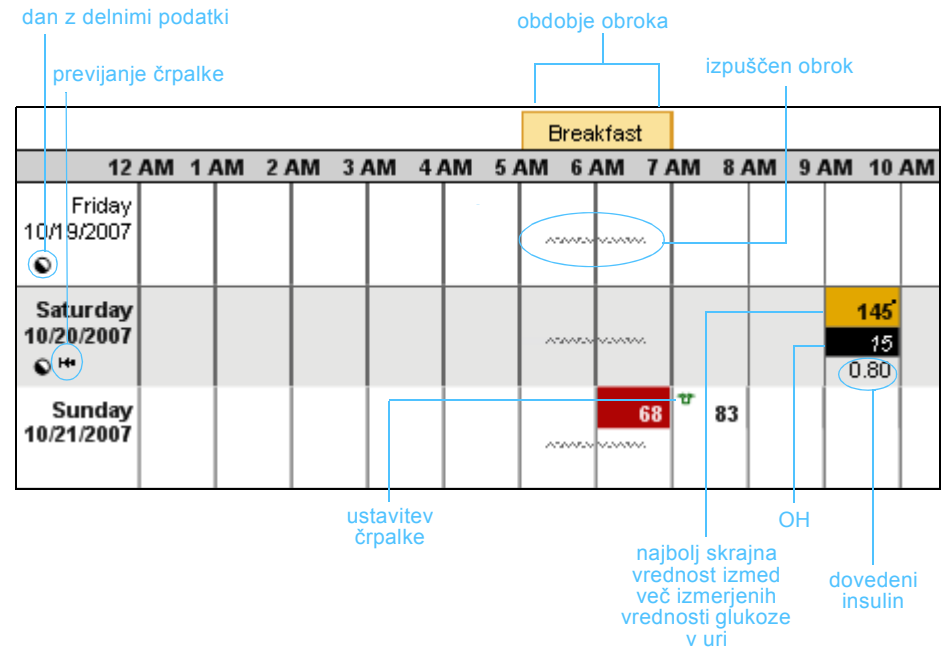

## Stolpec [Daily Totals] (Dnevni seštevki)

V stolpcu z dnevnimi seštevki je povzetek podatkov za vsak dan v obdobju poročanja. V prvi vrstici so podatki o povprečni dnevni vrednosti glukoze, izmerjeni z merilnikom, in o skupnem številu meritev. V drugi vrstici je skupen dnevni vnos ogljikovih hidratov, ki temelji na izračunu s funkcijo Bolus Wizard. V tretji vrstici je še skupna količina dovedenega insulina, delež insulina, ki je doveden v obliki bolusa, pa je izražen v odstotkih.

Daily Totals	
Average (7):	156mg/dL
Carbs:	258g
Insulin:	32.5U Bolus: 54%
Average (6):	140mg/dL
Carbs:	440g
Insulin:	41.3U Bolus: 62%



## Posnetek nastavitve naprave



**Device Settings Snapshot**  
Monday 11/5/2007 12:11 AM

Drake, Ethan  
0

Generated: 11/15/2007 2:17:25 PM Page 1 of 1  
Data Sources: MiniMed Paradigm 722 (E.Drake)

Basal	
Maximum Basal Rate	35.00 U/hr
Temp Basal Type	Insulin Rate (U/hr)

Standard (active)	Pattern A	Pattern B
24-Hour Total 15.70 U	24-Hour Total 66.80 U	24-Hour Total 197.20 U

TIME	U/hr	TIME	U/hr	TIME	U/hr
0:00	0.40	0:00	1.85	0:00	8.50
8:00	1.05	5:30	3.05	11:30	6.80
11:00	0.60	12:00	3.25	17:30	10.20
17:00	0.85	18:00	3.30	22:30	5.10
22:00	0.75	22:00	2.05		

Bolus	
Maximum Bolus	25.0 U
Dual/Square (Variable)	On
Blood Glucose Reminder	Off

Easy (Audio) Bolus	On
Entry (Step)	0.50 U

Bolus Wizard	On
Units	g. mg/dL
Active Insulin Time (h:mm)	8:00
Insulin Concentration (U)	--

Missed Bolus Reminder --	
Start (h:mm)	End (h:mm)
--	--

Carbohydrate Ratio (g/U)	
TIME	Ratio
0:00	20

Insulin Sensitivity (mg/dL per U)	
TIME	Sensitivity
0:00	40

Blood Glucose Target (mg/dL)		
TIME	Low	High
0:00	80	180

Notes

Sensor	
Sensor	On
Alert Silence (Type, h:mm)	--
Transmitter ID	1234567
BG Units	--

Glucose Alerts			
		Low (mg/dL)	High (mg/dL)
Alert Type	Off		
TIME			
0:00		80	140
Alert Repeat		0:05	0:05

Predictive Alert	--
Low   High (mins)	--   --

Rate Alert: Fall   Rise (mg/dL/min)	--   --
-------------------------------------	---------

AUC Limit: Low   High (mg/dL)	--   --
-------------------------------	---------

Missed Data/Weak Signal (h:mm)	0:05
--------------------------------	------

Graph Timeout (h:mm)	--
----------------------	----

Auto Calibration	--
------------------	----

Calibration Reminder (h:mm)	Off
-----------------------------	-----

Calibration (Alert) Repeat (h:mm)	0:05
-----------------------------------	------

Utilities	
Alert Type	Beep Short
Low Suspend (mg/dL)	--
Low Reservoir Warning	Time
Amount	22:00

## Hiter pregled posnetka nastavitve naprave

V poročilu o nastavitvah naprave so navedene prilagojene nastavitve bolnikove insulinske črpalke ali naprave Guardian, ki so bile dejavne ob dnevu in času, ko je bila naprava pregledana.

V poročilu so tabele z nastavitvami, ki ustrezajo glavnim menjem naprave: [Basal] (Bazalni odm.), [Bolus] (Bolusni odm.), [Sensor] (Senzor) in [Utilities] (Pripomočki).

Medtronic Device Settings Snapshot Monday 11/5/2007 12:11 AM Drake, Ethan 0

Generated: 11/15/2007 2:17:25 PM Page 1 of 1  
Data Source: MedMed Parsiply 722 (L Drake)

Basal	
Maximum Basal Rate: 35.00 U/hr	
Temp Basal Type: Insulin Rate (U/hr)	

Standard (active)		Pattern A		Pattern B	
24-hour Total	16.70 U	24-hour Total	09.00 U	24-hour Total	197.20 U
TIME	U/hr	TIME	U/hr	TIME	U/hr
0:00	0.40	0:00	1.56	0:00	0.60
3:00	1.06	6:30	3.06	11:30	0.60
11:00	0.60	12:00	3.25	17:30	10.20
17:00	0.05	19:00	3.30	22:30	5.10
22:00	0.75	22:00	2.05		

Bolus	
Maximum Bolus: 25.0 U	
Dose/Square (Var/Min)	On
Blood Glucose Reminder	Off
Bolus Wizard	On
Units	g, mg/dL
Active Insulin Time (h:min)	0:00
Insulin Concentration (U)	--


Sensor		
Sensor	On	
Alert Silence (Type, h:min)	--	
Transmitter ID	1214007	
BG Units	--	
Glucose Alerts	Off	
TIME	Low (mg/dL)	High (mg/dL)
0:00	80	140
Alert Repeat	0:05	0:05
Predictive Alert	--	--
Low/High (min)	--	--
Risk Alert: Fail (Rate (mg/dL/hr))	--	--
AUC Limit: Low/High (mg/dL)	--	--
Missed Data/Weak Signal (h:min)	0:05	
Graph Timeout (h:min)	--	
Auto Calibration	--	
Calibration Reminder (h:min)	Off	
Calibration/Alert Repeat (h:min)	0:05	

Utilities	
Alert Type	Deep Short
Low Suspend (mg/dL)	--
Low Reservoir Warning Time	
Amount	22:00

Carbohydrate Ratio (g/U)		Insulin Sensitivity (mg/dL per U)		Blood Glucose Target (mg/dL)		
TIME	Ratio	TIME	Sensitivity	TIME	Low	High
0:00	30	0:00	40	0:00	80	180





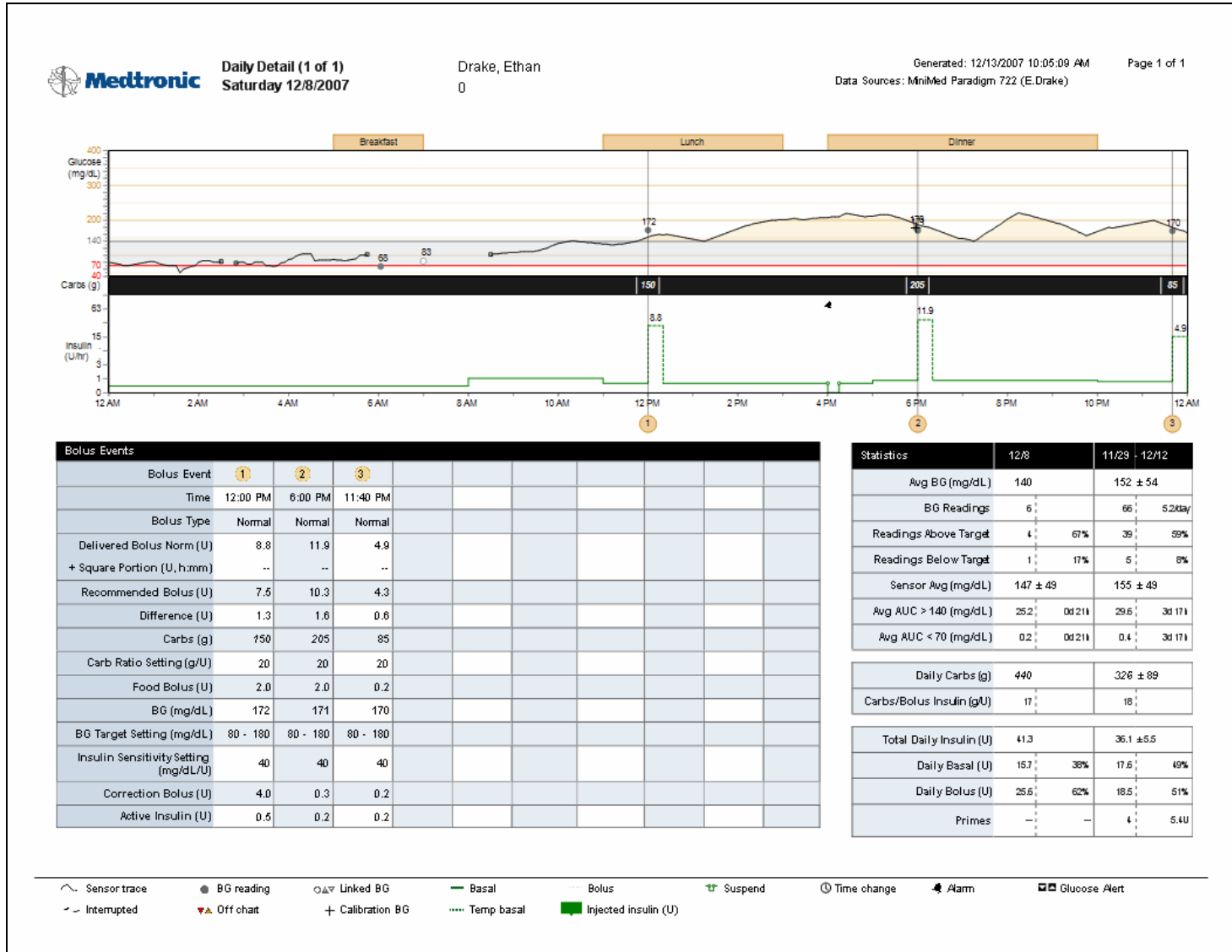









Notes

## Dnevno podrobno poročilo



## Kratek pregled dnevnega podrobnega poročila

V dnevnem podrobnem poročilu so podatki iz bolnikove insulinske črpalke, merilnikov glukoze v krvi in senzorja glukoze (če ga bolnik uporablja); ti podatki omogočajo vpogled v bolnikov nadzor, vključno z odzivom na vnos ogljikovih hidratov in uporabo insulina. V tem poročilu so podatki enega dne, ki so razdeljeni na tri območja, opisana v nadaljevanju.

Znak	Pomen
	Senzor zaznal sled: senzor glukoze je zaznal stalno sled
	Prekinjeno: prekinjena komunikacija med oddajnikom senzorja in insulinsko črpalko
	Vrednost GK: vrednost glukoze, izmerjena z merilnikom
	Odstopanje: vrednost merilnika glukoze > 400mg/dl (22,22 mmol/l) ali < 40mg/dl (2,22 mmol/l)
	Povezana GK: vrednosti GK iz merilnika, ki so samodejno poslani iz brezžičnega merilnika v insulinsko črpalko
	GK umerjanja: vrednost iz merilnika glukoze, s katero se umerja senzor
	Bazalni odmerek: stalno dovajanje insulina iz insulinske črpalke
	Začasni bazalni odmerek: začasna sprememba v dovajanju odmerka bazalnega insulina
	Bolus: dovajanje insulina iz črpalke, ki prepreči ali odpravi visoko raven glukoze
	Ustavi: prekinitve celotnega dovajanja insulina iz insulinske črpalke
	Sprememba časa: v insulinski črpalki ali uri Guardian je prišlo do spremembe časa
	Alarm senzorja: stanje, povezano s funkcijo senzorja, je povzročilo zapis alarma v črpalki. Alarmi senzorja so na grafikonu prikazani na traku glukoze, alarmi črpalke pa na traku insulina.
	Vbrizgani insulin (E): bolnik je sporočil vbrizganje insulina
	Opozorilo za glukozo: javljeno je opozorilo o visoki ali naraščajoči ravni glukoze. Javljeno je opozorilo o nizki ali padajoči ravni glukoze. Prikazana so tudi opozorila, ki predvidevajo dvig/padec ravni glukoze.


## Glukoza, ogljikovi hidrati in insulin

Na tem grafu je pregled bolnikovih ravni glukoze, vnosa ogljikovih hidratov in uporabe insulina na izbrani dan. V tem grafu so prikazane vrednosti glukoze, izmerjene z merilnikom, vrednosti glukoze, izmerjene s senzorjem (če se uporablja), vnos ogljikovih hidratov, zabeležen v računalu Bolus Wizard, dovajanje bazalnega in bolusnega insulina ter vbrizgani insulin. Prilagojena časovna obdobja, v katerih ima bolnik obroke, so označena z rumenimi kvadrati nad grafom.

Obkrožene številke na dnu grafikona ustrezajo vnosom v tabeli bolusnih odmerkov (na dnu poročila). Bolnikov ciljni obseg glukoze je obarvan sivo. Ko senzor izmeri sled glukoze nad ciljnim obsegom, je območje med sledjo in ciljnimi obsegom obarvano svetlo rumeno. Ko senzor izmeri sled glukoze pod ciljnimi obsegom, je območje med sledjo in ciljnimi obsegom obarvano svetlo rdeče.

Vrednosti glukoze v krvi iz merilnika so prikazane z pikami in ustreznimi številskimi vrednostmi. Vnos ogljikovih hidratov je prikazan v črnem traku pod vrednostmi glukoze. Zelena črta na dnu grafa označuje dovajanje insulina iz črpalke, vključno z bazalnimi in začasnimi bazalnimi odmerki, bolusi in ustavitvami.

**OPOMBA:** Dovajanje insulina je prikazano v enotah na uro v logaritemskem merilu. Tako so vidne tudi spremembe bazalnega odmerka, ki so relativno majhne, s tem pa je omogočen njihov prikaz skupaj z dovedenimi bolusi.

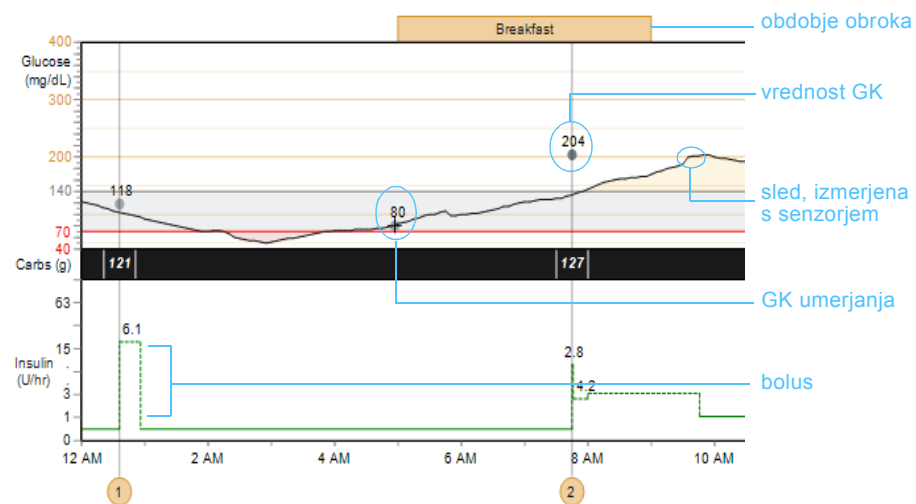

## Podatki o bolusnih odmerkih

V tabeli s podatki o bolusnih odmerkih [Bolus Events] je prikazan povzetek meritev in nastavitvev računalna Bolus Wizard za posamezen bolusni odmerek. Številke bolusnih odmerkov na vrhu tabele ustrezajo obkroženim številkam ob osi x na grafu [Glucose, Carbohydrates, and Insulin] (Glukoza, ogljikovi hidrati in insulin) na vrhu poročila. V nadaljevanju so opisani elementi v tabeli.

**[Bolus Event] (Bolusni odmerek):** referenca za graf [Glucose, Carbohydrates, Insulin] (Glukoza, ogljikovi hidrati in insulin)

**[Time] (Čas):** čas, ko je prišlo do bolusnega odmerka

**[Delivered Bolus Norm (U) + Square Portion] (Dovedeni bolus nav. (E) + podaljšani del):** dejanski dovedeni bolus, razdeljen na navadni in podaljšani odmerek

**[Recommended Bolus (U)] (Priporočeni bolus (E)):** bolusni odmerek, ki ga priporoča Bolus Wizard

**[Difference (U)] (Razlika (E)):** razlika med dovedenim in priporočenim bolusom

**[Carbs (g)] (OH (g)):** vnos ogljikovih hidratov

**[Carb Ratio Setting (g/U)] (Nastavitev razmerja OH (g/E)):** prikazuje nastavitev, s katero se izračuna del obroka za priporočeni bolus

**[Food Bolus (U)] (Bolus ob obroku (E)):** insulin, ki nadomesti vnos ogljikovih hidratov (bolus ob obroku + korekcijski bolus = priporočeni bolus)

**[BG] (GK) (mg/dl ali mmol/l):** vrednost glukoze iz merilnika, povezana z bolusnim odmerkom

**[BG Target Setting] (Nastavitev ciljne GK) (mg/dl ali mmol/l):** ciljni obseg ravni glukoze (glede na bolnikove nastavitve)

**[Insulin Sensitivity Setting] (Nastavitev občutljivosti na insulin) (mg/dl/E ali mmol/l/E):** povišanje ravni glukoze, ki jo povzroči 1 enota insulina (glede na bolnikove nastavitve)

**[Correction Bolus] (Korekcijski bolus) (E):** insulin, ki popravi visoko raven glukoze (bolus ob obroku + korekcijski bolus = priporočeni bolus)

**[Active Insulin] (Aktivni insulin) (E):** dovedeni bolusni insulin, ki še ni absorbiran

Bolus Events	
Bolus Event	1
Time	5:52 AM
Bolus Type	Normal
Delivered Bolus Norm (U)	1.9
+ Square Portion (U, h:mm)	--
Recommended Bolus (U)	1.9
Difference (U)	--
Carbs (g)	37
Carb Ratio Setting (g/U)	20
Food Bolus (U)	1.9
BG (mg/dL)	148
BG Target Setting (mg/dL)	80 - 180
Insulin Sensitivity Setting (mg/dL/U)	40
Correction Bolus (U)	--
Active Insulin (U)	--

## Statistika

S podatki v tabeli s statistiko [Statistics] in z elementi iz drugih poročil je mogoče primerjati bolnikovo vedenje v različnih obdobjih poročanja in zaznati področja, ki jih je treba dodatno raziskati.

V prvih dveh stolpcih so podrobni statistični podatki in povprečne vrednosti za izbrani dan. V zadnjih 2 stolpcih so podrobnosti iz celotnega obdobja poročanja.

V tabeli s statistiko so podatki, opisani v nadaljevanju.

**[Avg BG] (Povpr. GK) (mg/dl ali mmol/l):** povprečje vseh vrednosti glukoze, izmerjenih z merilnikom

**[BG Readings] (Vrednosti GK):** skupno število vrednosti glukoze iz merilnika

**[Readings Above Target] (Vrednosti nad ciljem):** skupno število vrednosti glukoze iz merilnika nad ciljnim obsegom

**[Readings Below Target] (Vrednosti pod ciljem):** skupno število vrednosti glukoze iz merilnika pod ciljnim obsegom

**[Avg Sensor Gluc.] (Povpr. gluk. senzorja) (mg/dl ali mmol/l):** povprečje vseh vrednosti glukoze, izmerjenih s senzorjem, in standardni odklon

**[Avg. AUC >140 (mg/dL)] (Povpr. AUC >140 (mg/dl)) ali [Avg AUC >7,77 (mmol/L)] (Povpr. AUC >7,77 (mmol/l)):** povprečna izpostavljenost hiperglikemiji (vrednost temelji na bolnikovem ciljnim obsegu)

**[Avg. AUC <70 (mg/dL)] (Povpr. AUC <70 (mg/dl)) ali [Avg AUC <3,88 (mmol/L)] (Povpr. AUC 3,88 (mmol/l)):** povprečna izpostavljenost hipoglikemiji (vrednost temelji na bolnikovem ciljnim obsegu)

**[Daily Carbs] (Dnevni OH) (g):** skupen dnevni vnos ogljikovih hidratov

**[Carbs/Bolus Insulin (g/U)] (OH/bolusni insulin (g/E)):** povprečni vnos ogljikovih hidratov na enoto bolusnega insulina

**[Total Daily Insulin (U)] (Skupni dnevni insulin (E)):** povprečje skupne količine bazalnega in bolusnega insulina

**[Daily Basal] (Dnevni bazalni odmerek):** povprečni dnevni vnos bazalnega insulina (E in odstotki od skupnega dnevnega insulina)

**[Daily Bolus] (Dnevni bolus):** povprečni dnevni vnos bolusnega insulina (E in odstotki od skupnega dnevnega insulina)

**[Primes] (Polnjenja):** število polnjenj črpalke in enote insulina, porabljene za polnjenje

Statistics	11/15		11/15	12/12
Avg BG (mg/dL)	163		152 ± 54	
BG Readings	6		138	5.4/day
Readings Above Target	4	67%	82	59%
Readings Below Target	—	0%	12	9%
Sensor Avg (mg/dL)	--		157 ± 53	
Avg AUC > 140 (mg/dL)	—	—	31.4	10d9l
Avg AUC < 70 (mg/dL)	—	—	0.4	10d9l
Daily Carbs (g)	259		331 ± 92	
Carbs/Bolus Insulin (g/U)	17		18	
Total Daily Insulin (U)	33.1		36.3 ± 5.4	
Daily Basal (U)	17.6	53%	17.6	49%
Daily Bolus (U)	15.5	47%	18.6	51%
Primes	—	—	7	9.9U

**OPOMBA:** Če je prišlo do dogodka v funkciji Bolus Wizard, vendar je bil izračunani bolus preklican pred dovajanjem, bo v tabeli prikazan dogodek funkcije Bolus Wizard, bolus pa ne.